

# VF-Syringe

## (ガラス製プレフィル用シリンジ)

### 製品仕様

お客様のニーズに合わせて、各種仕様を設定しております。  
また、特別仕様などのご要望にも対応致します。

| 仕様 | 未洗浄 | 洗浄 | シリコンコート | 滅菌 |
|----|-----|----|---------|----|
| A  | ✓   |    |         |    |
| B  |     | ✓  |         |    |
| C  |     | ✓  | ✓       |    |
| D  |     | ✓  | ✓       | ✓  |



#### 未洗浄

お客様にて洗浄工程から実施される場合の仕様となります。弊社では外観・寸法検査工程を経て出荷致します。

#### 洗浄

精製水にてバレルの内外面を洗浄して、クリーンな状態で包装、出荷致します。

#### シリコンコート

優れた定量性をバリデーションにより保証し、かつ詳細な工程検査によりコートの実績性を保証しております。また、コートと同時に発熱性物質の除去も兼ねてます。

#### 滅菌

エチレンオキシドガスにより滅菌処理致します。ガイドラインに基づく滅菌バリデーションの実施により無菌性を保証致します。

### 規格品寸法

#### ●スタンダードタイプ

| 製品名     | 容量(mL) | 外径(mm) | 内径(mm) | 全長(mm) | 形状適合基準      |
|---------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| VF-1.0  | 1.0    | 8.15   | 6.35   | 64.0   | ISO 11040-4 |
| VF-2.25 | 2.25   | 10.85  | 8.65   | 65.5   |             |
| VF-5.0  | 5.0    | 14.45  | 11.85  | 79.4   |             |
| VF-A5   | 5.0    | 14.85  | 12.45  | 79.0   | 専用形状        |

※上記品種はルアーロックアダプターを装着することが可能です。

#### ●両頭針タイプ


| 製品名    | 容量(mL) | 外径(mm) | 内径(mm) | 全長(mm) | 形状適合基準 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| VF-ME2 | 2.0    | 10.85  | 8.65   | 68.3   | 専用形状   |

### 包装仕様

お客様のニーズに合わせて、2種類の基本包装仕様を設定しております。また、ご要望により専用包装仕様にも対応致します。

#### ●ロンドトレイ

洗浄されたロンドトレイに装填し、ステンレスパットで包装致します。

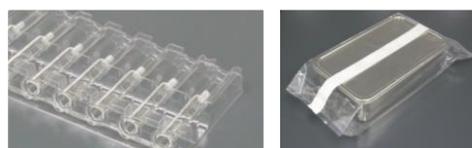

#### ●TASPACK®

お客様にて開封後、即充填できるように設計された包装仕様です。

